


AsahiKASEI

—— 適切な胸骨圧迫を目指して ——

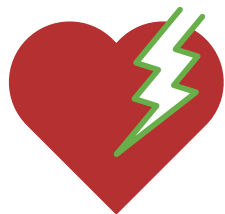

ZOLL® 自動体外式除細動器

AED PLUS™


高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 医療機器承認番号 22200BZ100015000



心肺蘇生で重要な
「胸骨圧迫」を適切にナビゲート



正しい手順を、イラストと
ディスプレイで分かりやすく

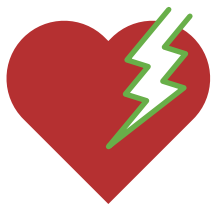

ZOLL® 自動体外式除細動器 AED PLUS™

AsahiKASEI


販売名: ZOLL AED Plus 半自動除細動器
医療機器承認番号 22200BZ100015000

ZOLL AED PLUS™ の特長1

心肺蘇生で重要な「胸骨圧迫」を 適切にナビゲートします

パズに内蔵された**加速度センサ**が「深さ」と「速さ」を感知して、適切な胸骨圧迫ができるよう音声ガイダンスとディスプレイ表示でナビゲートします。

＼もっと強く押しして下さい／
＼ピッ ピッ ピッ／

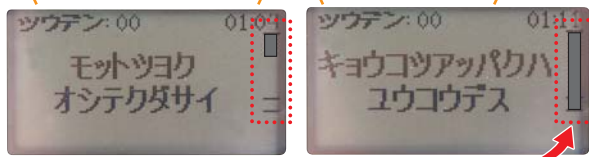

バーが上下して深さを確認できます

ナビゲートディスプレイ




ZOLL AED PLUS™ の特長2

貼りミスなどを防止する 一体型電極パズ

加速度センサ (CPRセンサ) の十字線を胸の中心に合わせることで、パズの位置決めがすばやくできます。

加速度センサ (CPRセンサ)

加速度センサ (CPRセンサ) の十字線を胸の中心に合わせる

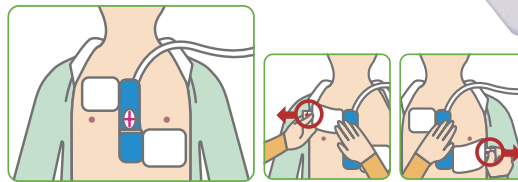

ZOLL AED PLUS™ の特長3

5年間パックの消耗品付

未使用なら消耗品 (電極パズ、バッテリー) は**5年間買換え不要***
です。消耗品の交換コストがかりません。

*成人用電極パズ (CPR-D-padz) の場合。小児用電極パズの有効期限は2年となります。



イラストと ディスプレイ表示

救命の流れがわかるイラストとディスプレイ表示や音声によるナビゲートで、安心してご使用いただけます。



雨天時でも使用可能

IP55規格の高い防水性・防塵性を備えています。

幅広い気温に対応!!

保管温度 -30℃~60℃ 動作温度 0℃~50℃



【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

フリーダイヤル 0800-222-0889 (AEDコールセンター)

一般的名称: 非医療従事者向け自動除細動器
販売名: ZOLL AED Plus 半自動除細動器
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

医療機器承認番号: 22200BZ100015000

文書番号: 02-1209

お問い合わせ先

ユニティガードシステム株式会社

東京都港区西新橋一丁目10番8号
TEL: 03-3501-3645 FAX: 03-3501-3637